



NL 100



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Operating Instructions
Gebruiksaanwijzing

D
F
GB
NL

NL 100

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction. N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou ne procédez à aucune réparation.

Compatibilité de l'audioprothèse
Le produit est compatible avec la plupart des audioprothèses du marché. Au vu toutefois du grand nombre de prothèses audio disponibles, il ne nous est impossible de garantir que l'absence de panne avec chacun des modèles.

Mise au rebut

Vous êtes tenu de jeter tous les consommables conformément aux réglementations applicables. Le symbole figurant sur le produit indique que l'appareil électronique et électrique et les piles usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

Les appareils électriques et électroniques doivent être jetés dans des points de ramassage installés par les autorités en charge de la gestion des déchets. Les matériaux d'emballage doivent être jetés conformément aux réglementations locales.



Assistance téléphonique au 0526 805 674 (numéro Indigo)

Bien commencer

1. Vérifiez le contenu de l'emballage

Contenu	NL 100
Lanterne NL 100	1
Pile AAA	1
Adaptateur produit 2,5 mm à 3,5 mm	1
Mode d'emploi	1

2. Insérer la pile


Insérer la pile AAA dans le compartiment des piles situé à l'arrière du NL 100. Faire attention à bien repérer les bornes + et - et à placer la pile correctement. Fermer le couvercle du compartiment des piles.



Attention : ne pas utiliser de piles rechargeables

3. Brancher le NL 100

Brancher le NL 100 à la prise du casque de votre combiné PowerCall, comme indiqué sur le schéma, et placer la lanterne autour de votre tête.

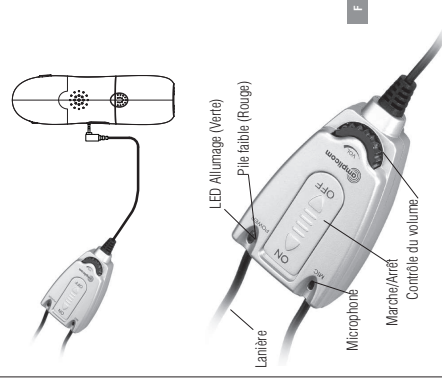

Assistance téléphonique au 0636 805 674 (numéro Indigo)

9

Utilisation du NL 100

Utilisation du NL 100

Le NL 100 utilise un système de boucle d'induction qui fonctionnera avec votre appareil auditif, lorsqu'il est réglé sur la position 'I', afin que vous bénéficiiez d'une meilleure qualité de son.

1. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur 'ON'. La LED de puissance verte s'allumera.

Si la LED de puissance devient rouge, cela signifie que la pile est faible. Vous devez donc la changer dès que possible.

2. Régler votre appareil auditif sur le mode 'T' ou 'MT'.
3. Régler le volume en utilisant la molette du NL 100.
4. Votre NL 100 est maintenant prêt à être utilisé, et vous pouvez parler à vos interlocuteurs grâce au microphone intégré.
5. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur 'OFF' à la fin de votre appel afin d'économiser la puissance de la pile. La LED de puissance s'éteindra.

F

Vous pouvez utiliser l'adaptateur produit fourni avec votre NL 100 pour le brancher à des appareils compatibles MP3 ou téléphones mobiles. Suivre les étapes suivantes.

10

Assistance téléphonique au 0636 805 674 (numéro Indigo)

Entretien/Garantie

Entretien/Garantie

Entretien

- Nettoyez les surfaces du produit à l'aide d'un chiffon doux sans peluches
- N'utilisez jamais agents nettoyants ou de solvants

Garantie

Les appareils AMPLICOM sont conçus et testés conformément aux techniques de production les plus récentes. L'utilisation de matériaux choisis avec minutie et technologies sophistiquées garantit un fonctionnement sans problèmes et un cycle de vie prolongé. En ce qui concerne la garantie, les conditions de vente sont strictement celles de l'appareil et non celles du fournisseur. Le mode d'entretien de l'appareil est dû à l'opérateur du réseau téléphonique ou à tout système d'extension d'autocommutateur privé implémenté. Les termes de la garantie ne s'appliquent pas aux piles remplaçables ou aux packs d'accus utilisés dans les appareils. La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat.

Tous les désagréments résultant de défauts des matériaux de fabrication se produisant pendant la période de garantie seront résolus gratuitement. Les droits de réclamation conformément aux termes de la garantie sont annulés après l'intervention par l'acheteur ou des tiers parties. Les dommages résultant d'une mauvaise manipulation ou fonctionnement, d'un usage non autorisé, d'un sabotage, d'appareils, n'entraînent pas de responsabilité de la part du fabricant. Les dommages dus à un utilisateur ne sont pas couverts par les termes de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer les parties défectueuses ou de fournir un appareil de rechange. Les appareils ou les pièces de rechange sont de notre propriété. Les droits à une compensation en cas de dommage sont exclus en l'absence de preuve ou d'intention ou de négligence flagrante par le fabricant.

Si votre appareil montre des signes de délabrance pendant la période de garantie, veuillez le renvoyer au point de vente dans lequel vous avez acheté l'appareil AMPLICOM accompagné du reçu. Les droits de retour sont réservés. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur exclusivement certifiés pour ce qui est du point de vente. Deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les réclamations dans la garantie ne peuvent plus être présentées.

Attestation de conformité

Cet appareil est conforme aux normes stipulées dans la directive européenne.

La directive 1999/5 EU sur les appareils radio et les équipements de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité avec la directive susmentionnée est confirmée par le symbole CE figurant sur l'appareil. Pour lire l'attestation de conformité dans son intégralité, veuillez vous reporter au téléchargement gratuit sur notre site Internet www.amplicom.de.



Distributeur par: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

F



Assistance téléphonique au 0826 805 674 (numéro Indigo)

11

Remarques importantes concernant la garantie

Remarques importantes concernant la garantie

La période de garantie de votre produit AMPLICOM commence à la date d'achat. Une préférence à la garantie existe en cas de défauts provenant de pièces de matériel ou de production. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un entretien ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccourcissement ou d'une installation incorrecte ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie.

EN CAS DE GARANTIE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER EXCLUSIVEMENT À VOTRE REVENDEUR APRES DUQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ L'APPAREIL, ET N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE PRÉSENTER VOTRE BON D'ACHAT.

F

AFIN D'ÉVITER DE LONGS TEMPS D'ATTENTE INUTILES, N'ENVOYEZ PAS VOS APPAREILS SUJETS À RÉCLAMATION À NOTRE ADRESSE DE BUREAU.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION ET LA PRESTATION DE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI OU VOUS ADRESSER À NOTRE HOTLINE : 0826 805 674

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicom.eu
E-mail: info@audioline.de

Version 1.1 - 15.06.2010

12